

MANUAL DEL USUARIO

ANTES DE LA INSTALACION:


- Asegurarse de tener Windows 7 o versiones mas actuales
- Debe tener instalado Adobe Reader

INSTALACION:


- Copiar la carpeta periodoncia del CD al equipo
- La base de datos de los nuevos pacientes queda almacenada en la carpeta periodoncia del equipo
- Si desea pasar la información de un computador a otro se debe copiar y pegar la carpeta periodoncia para poder transferir la base de datos sin que esta información se pierda
- Se aconseja tener una copia de la base de datos para prevenir futuras perdidas de la información en caso de daño del aplicativo

PASOS PARA EJECUTAR EL APLICATIVO:

- Damos doble clic en la carpeta periodoncia, y luego doble clic en periodoncia aplicativo

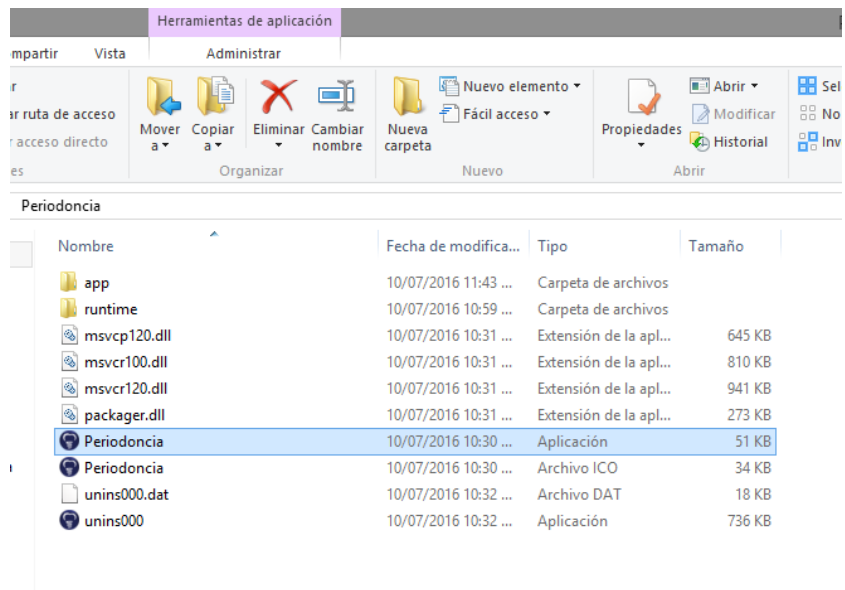

- Se abre el aplicativo con esta primera ventana

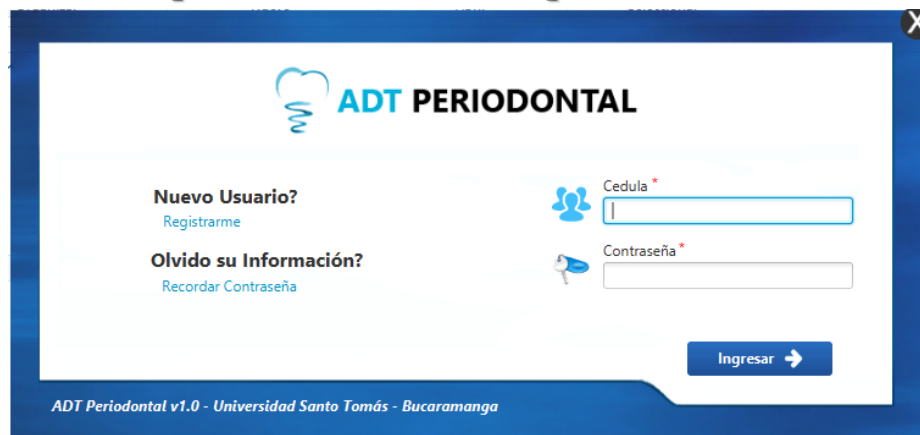

- Damos clic en registrarme y se abre esta ventana

Regístrame


Bienvenido!! Para poder ingresar a la aplicación registre sus datos

Nombres *
 Apellidos *
 Sexo *
☐ Masculino ☐ Femenino
 Correo *
 Cedula *
 Código USTA *

Su registro sera enviado a la Universidad Santo Tomas donde puede consultar su contraseña de ingreso al Software.

Solicitar Contraseña

- Ingresamos todos los datos personales y finalmente damos clic en solicitar contraseña, la información dada se envía a un correo de la universidad donde allí llegara la contraseña que usara este usuario para ingresar a la plataforma
- El usuario deberá consultar la contraseña con el personal asignado para esta tarea
- Luego de obtener la contraseña, ingresamos los datos de cedula y contraseña para el inicio de sesión

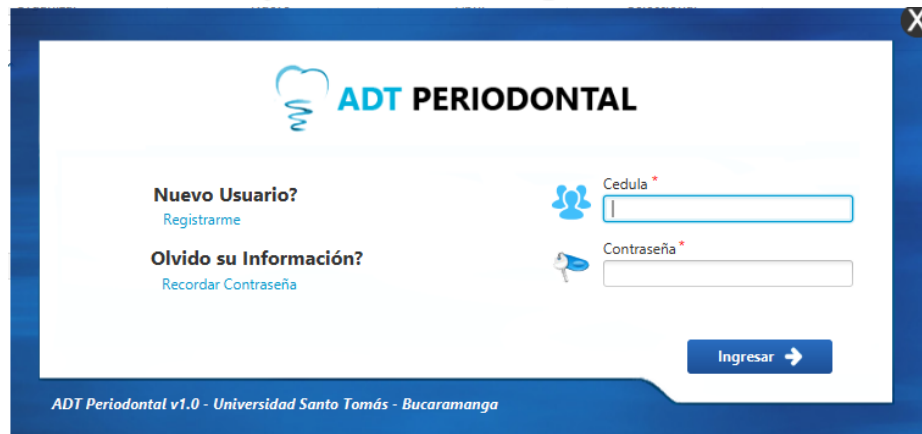

- Nos abre la plataforma de bienvenida



- Damos clic en agregar paciente y nos abre la ventana para ingresar los datos personales

ADT PERIODONTAL

DRA. ANA MARIA GARCIA JAIME | Cambiar Usuario

Historia Clínica

Identificación

Nombres: Nombres del paciente | Apellidos: Apellidos del paciente

Lugar de nacimiento: Lugar de nacimiento | Fecha de Nacimiento: Fecha de nacimiento

Género: | Edad: | Grupo Sanguíneo: |

Tipo Documento: | Número Documento: Número documento

Ciudad de residencia: Ciudad de residencia | Teléfono: Teléfono de residenc

Dirección de residencia: Dirección de residencia

Tipo de afiliación: | EPS: EPS

Menor de Edad

Nombre Responsable: Nombre y Apellido del Adulto Responsable | Parentesco: Parentesco del responsab

Dirección: Ciudad de residencia | Teléfono: Teléfono de residencia:

Nombre del Padre / Madre: Dirección de residencia

Ocupación Padre/Madre: Ocupación del padre o de la madre


Capturar Foto

Datos básicos

Informe | Menu Principal | Insertar | Cancelar

- Registramos toda la información suministrada por el paciente, podemos tomarle una foto capturándola por la cámara del computador, deben estar todos los campos llenos para que la información sea guardada. Una vez se registren los datos damos clic en insertar.
- Nos aparece el ítem de anamnesis justo debajo de datos básicos que se encuentra al lado izquierdo, allí damos clic en anamnesis y registramos los datos a continuación..

Historia Clínica
Diego Aguirre

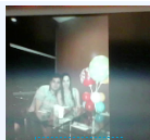

Capturar Foto

Datos basicos

Anamnesis



Identificación

Nombres: Diego	Apellidos: Aguirre
Lugar de nacimiento: bucaramanga	Fecha de Nacimiento: 19/04/1983
Género: Masculino	Edad: 33
Tipo Documento: CC	Grupo Sanguíneo: B+
Ciudad de residencia: bucaramanga	Número Documento: 91520820
Dirección de residencia: cr 29 31 45	Teléfono: 6323747
Tipo de afiliación: Contributivo	EPS: sanitas




Informe

Menu Principal

Guardar

Cancelar

Historia Clínica
Diego Aguirre

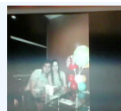

Capturar Foto

Datos basicos

Anamnesis

Historia Familiar Historia Personal Examen Físico

Enfermedad	Parentesco	Observaciones
DIABETES		
CANCER		
ENF. CARDIOVASCULARES		
ENF. HEMATOLOGICAS		
ARTRITIS		
T.B.C		
ALERGIAS	esposa	
ENF. DERMATOLOGICAS		
ANOMALIAS CONGENITAS		
ENF. MENTALES		
OTRAS ENFERMEADES		



Informe

Menu Principal

Guardar

Cancelar

ADT PERIODONTAL DRA. ANA MARIA GARCIA JAIME Cambiar Usuario

Historia Clínica
Diego Aguirre

Historia Familiar **Historia Personal** Examen Físico

Enfermedades:

☐ TRAUMAS	☐ ENF. DERMATOLÓGICAS	☐ SISTEMA NERVIOSO
☒ CIRUGÍAS	☐ ENF. GASTROINTESTINALES	☐ ENF. ENDOCRINAS
☐ CARDIOPATÍAS	☐ ENF. VENÉREAS	☐ FIEBRE REUMÁTICA
☐ HIPERTENSIÓN	☐ INMUNODEFICIENCIAS	☐ ENF. DE LA NIÑEZ
☐ CÁNCER	☐ CONVULSIONES	☐ V.I.H SIDA
☐ ENFERMEDADES HEPÁTICAS	☐ ENF. RENALES	
☐ ALERGIAS	☐ ENF. VIRALES	
☐ ENF. MÚSCULO ESQUELÉTICAS	☐ ENF. RESPIRATORIAS	
☐ TRASTORNOS ARTICULARES	☐ ENF. HEMATOLÓGICAS	
☐ LESIONES / ENF. ÓSEAS	☐ FARMACODEPENDENCIA	

A las patologías encontradas describa código, fecha_inicio, duración, tratamiento_recibido

ojos

Informe Menu Principal Guardar Cancelar

ADT PERIODONTAL DRA. ANA MARIA GARCIA JAIME Cambiar Usuario

Historia Clínica
Diego Aguirre

Historia Familiar Historia Personal **Examen Físico**

Fecha: 10/07/2016 Aspecto General: ☒ Normal ☐ Anormal

Frecuencia Cardíaca: Presión Arterial: Frecuencia Respiratoria:

Peso: Temperatura: Talla: SV:

Observaciones:

huokj

Informe Menu Principal Guardar Cancelar

- Luego de ingresar todos los datos damos clic en insertar, recuerde que los campos deben estar llenos para que la información sea guardada. Siempre que se ingrese nueva información recuerde dar guardar inmediatamente después de ingresada la información.

- Para sacar un reporte de esta información damos clic en informe (PDF)

ADT PERIODONTAL DRA. ANA MARIA GARCIA JAIME [Cambiar Usuario](#) — ✕

Historia Clínica
Diego Aguirre


Capturar Foto

[Datos basicos](#)
[Anamnesis](#)

Historia Familiar **Historia Personal** **Examen Físico**

Fecha: 10/07/2016 ☐ Aspecto General: ☒ Normal ☐ Anormal

Frecuencia Cardíaca: Presión Arterial: Frecuencia Respiratoria:

Peso: Temperatura: Talla: SV:


Observaciones:
huokj

 Informe [Menu Principal](#) [Guardar](#) [Cancelar](#)

- Volvemos al menú principal

ADT PERIODONTAL DRA. ANA MARIA GARCIA JAIME [Cambiar Usuario](#) — ✕

Historia Clínica
Diego Aguirre

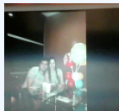
Capturar Foto

[Datos basicos](#)
[Anamnesis](#)

Historia Familiar **Historia Personal** **Examen Físico**

Fecha: 10/07/2016 ☐ Aspecto General: ☒ Normal ☐ Anormal


Frecuencia Cardíaca: Presión Arterial: Frecuencia Respiratoria:

Peso: Temperatura: Talla: SV:

Observaciones:
huokj

 Informe [Menu Principal](#) [Guardar](#) [Cancelar](#)

- Damos clic en periodontograma

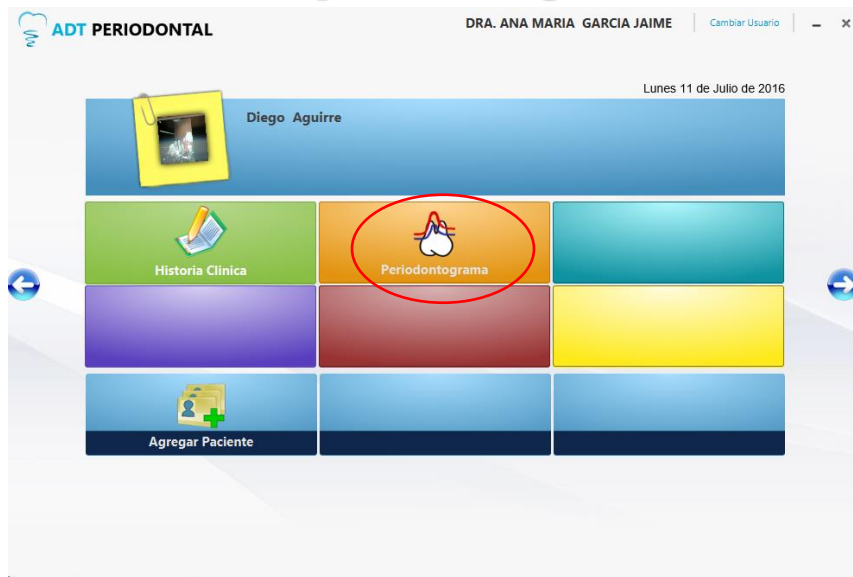

- Damos clic + del recuadro verde para crear un nuevo periodontograma

The screenshot shows the 'Periodontograma' form for patient 'natalia garcia'. The form is divided into sections for 'Vestibular' and 'Palatino' arches. Each section has a table with columns for teeth (18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) and rows for clinical parameters: Margen, Profundidad, Niv.Inserción, Furca, Placa, Sangrado, Movilidad, and LMG. A red circle highlights the green plus icon in the top left corner of the form, indicating the button to create a new periodontogram. At the bottom, there are buttons for 'Informe' (with a PDF icon), 'Menu Principal', 'Guardar' (green), and 'Cancelar' (red).

The screenshot shows the ADT PERIODONTAL software interface. At the top, the user is identified as 'DRA. ANA MARIA GARCIA JAIME'. The main window displays a periodontogram for 'natalia garcia'. A modal dialog box titled 'Crear Nuevo Periodontograma' is open, allowing the user to create a new record. The dialog contains the following fields:

- Paciente:** natalia garcia
- Periodontograma:** (empty text field)
- Descripción:** (empty text area)

At the bottom of the dialog are 'Crear' and 'Cancelar' buttons. The background interface shows a grid for recording periodontal data across various teeth (18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) and parameters (Margen, Profundidad, Niv.Inserción, Furca, Placa, Sangrado, Movilidad, LMG). A sidebar on the left includes options for 'Fecha', 'Detalle', 'Arcada', and 'Regla'.

- Una vez registro los datos damos crear, en el ítem donde dice periodontograma el máximo es de 12 letras
- Registramos los datos según el sondaje periodontal, dando clic sobre el diente y aparece un recuadro donde se digita los valores

The screenshot shows the ADT PERIODONTAL software interface with a periodontogram for 'Diego Aguirre'. A modal dialog box titled 'VESTIBULAR 14' is open, allowing the user to record data for tooth 14. The dialog contains the following fields:

- Margen:** 0 0 0
- Profundidad:** 0 0 0
- Furca:** (empty dropdown)
- Placa:** 0 0 0
- Sangrado:** (checkboxes)
- Movilidad:** (empty dropdown)
- LMG:** 0

At the bottom of the dialog are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. The background interface shows a grid for recording periodontal data across various teeth (18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) and parameters (Margen, Profundidad, Niv.Inserción, Furca, Placa, Sangrado, Movilidad, LMG). A sidebar on the left includes options for 'Fecha', 'Detalle', 'Arcada', and 'Regla'.

- Una vez se ingresen todos los datos se da clic en guardar

- Podemos ver diferentes opciones como poner o quitar regla, margen, LMG, bolsas (opciones de visualización del periodontograma)
- También tenemos la opción ver índices, donde el software calcula tres índices: índice de Silness y loe, índice de severidad y extensión, índice de necesidad de tratamiento periodontal CIP
- Cuando todo este digitado y queramos tener el informe completo finalizado damos clic en guardar y luego clic en informe (pdf)
- Estos formatos en pdf son los documentos que podemos guardar en nuestros equipos para tener una copia de la información.

ADT PERIODONTAL DIR. ANA MARIA GARCIA JAIME [Cambiar Usuario](#)

Historia Clínica
Diego Aguirre

Identificación

Nombre: Diego	Apellidos: Aguirre
Lugar de nacimiento: Bucaramanga	Fecha de Nacimiento: 19/04/1983
Género: Masculino	Edad: 33
Tipo Documento: CC	Número Documento: 91520620
Ciudad de residencia: Bucaramanga	Teléfono: 6323747
Dirección de residencia: cr 20 31 45	
Tipo de afiliación: Contributivo	EPS: samitas

Periodontograma
Diego Aguirre

Fecha: 2016-07-10
Detalle: valoración

Arca de
SUPERIOR

Regla
☒ Margen
☒ LMG
☒ Bolsas

Ver Indices

Informe **Memo Principal** **Guardar** **Cancelar**

Recuerde esperar unos segundos cada vez que hagamos clic en alguna opción, para evitar bloquear o desconfigurar el software.